

Aplicación precisa en anatomía compleja de paredes finas

Benefíciase de una solución todo en uno que aúna tecnología punta con una nueva flexibilidad.

Inyectar, cortar, coagular – sin necesidad de cambiar de instrumento – para un flujo de trabajo eficiente y facilidad de uso.

ADAPTE SU PROPIA TÉCNICA.

HYBRIDknife® flex

Elevación de la endoscopia
del 3er espacio

erbe
power your performance.

Erbe Elektromedizin GmbH · Waldhoernlestrasse 17 · 72072 Tuebingen · Alemania · +49 7071 755-0 · info@erbe-med.com

JOIN US ON





Elevación de la endoscopia del 3er espacio

Electrodo fino para aplicaciones precisas
con daños térmicos limitados

Sonda flexible para un paso suave
incluso en retroflexión

Boquilla coaxial para inyección a alta presión

Diámetro reducido para una succión
adecuada a través del canal de trabajo

Mecanismo de bloqueo para una
longitud constante del electrodo

Inyectar sin aguja

Amplíe el espacio submucoso sin intercambio de instrumentos mediante la hidrodissección selectiva de tejidos a alta presión y sin agujas.

Corte y coagule con precisión

Consiga una alta precisión electroquirúrgica con un daño térmico limitado utilizando el electrodo fino, y aplique diversas técnicas de coagulación con VIO®.

Flexibilidad con estabilidad

Espere un paso suave y una longitud de electrodo estable, incluso en posiciones endoscópicas anguladas o retroflexionadas difíciles.

Marketing claim list 0188716, V005


VIO® 3

APC3

ERBEJET® 2

**EL HYBRIDKNIFE® FLEX
UNE LA ELECTROCIRUGÍA
CON LA HIDRODISECCIÓN**

Powered by VIO® 3

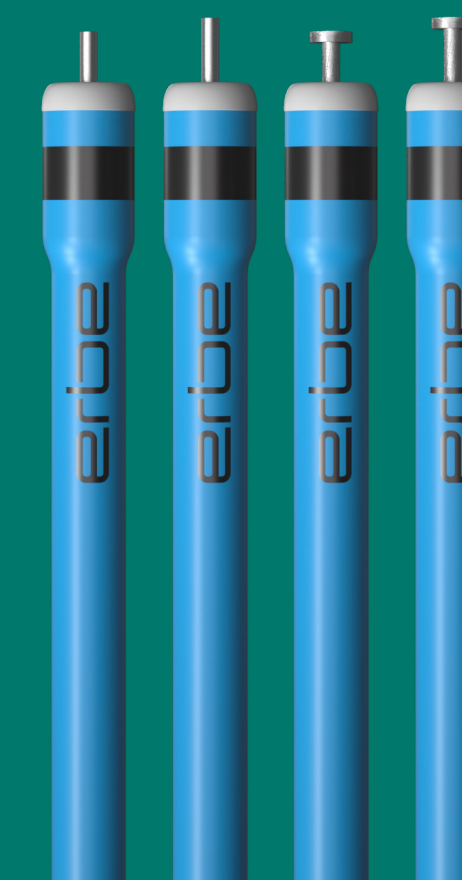

Longitud del tubo	2300 mm
Diámetro exterior (extremo distal)	2,6 mm
Diámetro exterior (tubo)	2,1 mm
Longitud del electrodo	1,5 mm / 2,0 mm
Tipo	I y T
Retro-flexibilidad	Más de 210
Tipo T 1,5 mm	Nº 20150-110
Tipo T 2,0 mm	Nº 20150-111
Tipo I 1,5 mm	Nº 20150-112
Tipo I 2,0 mm	Nº 20150-113



ENCUENTRE SU PRODUCTO