

# Application précise des lésions superficielles

*Bénéficiez d'une solution tout-en-un  
alliant une technologie de pointe à  
une nouvelle flexibilité.*

*Injecter, couper, coaguler - sans  
changer d'instrument - pour une  
procédure sûre et une utilisation  
simple.*

**FAÇONNEZ VOTRE PROPRE  
TECHNIQUE.**



**erbe**  
power your performance.

**HYBRIDknife® flex**

Élever l'endoscopie  
du 3e espace

Erbe Elektromedizin GmbH · Waldhoernlestrasse 17 · 72072 Tuebingen · Allemagne · +49 7071 755-0 · info@erbe-med.com

JOIN US ON

# Élévation de l'endoscopie du 3e espace



**Electrode fine** pour des applications précises avec des dommages thermiques réduits

**Buse coaxiale** pour l'injection à haute pression

**Sonde flexible** pour un accès facile, même en rétrovision

**Petit diamètre** pour une aspiration optimisée dans le canal opérateur

**Mécanisme de verrouillage** pour une longueur d'électrode fixe

Liste de claim marketing 0188716, V005



**L' HYBRIDKNIFE® FLEX ASSOCIE L'ÉLECTROCHIRURGIE À L'INJECTION À HAUTE PRESSION**

Connecté au VIO® 3

## Injecter sans aiguille


Soulevez l'espace sous-muqueux sans changer d'instrument, à l'aide d'une injection à haute pression et sans aiguille.

## Couper et coaguler avec précision

Obtenez une haute précision de coupe électrochirurgicale avec des dommages thermiques réduits en utilisant l'électrode fine et en sélectionnant diverses techniques de coagulation avec les modes VIO®.

## Flexibilité et stabilité

Bénéficiez d'une flexibilité améliorée et d'une longueur d'électrode adaptée pour des conditions de travail optimales en rétrovision et dans les localisations difficiles.

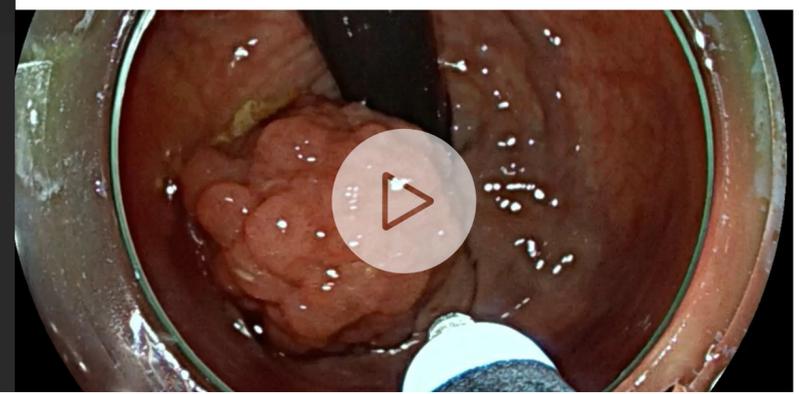

Longueur de la sonde	2300 mm
Diamètre extérieur (extrémité distale)	2,6 mm
Diamètre extérieur (tube)	2,1 mm
Longueur de l'électrode	1,5 mm / 2,0 mm
Type d'électrode	I et T
Rétro-flexibilité	Plus de 210°
Type T 1,5 mm	N° 20150-110
Type T 2,0 mm	N° 20150-111
Type I 1,5 mm	N° 20150-112
Type I 2,0 mm	N° 20150-113

TROUVEZ VOTRE PRODUIT