

Nauwkeurige toepassing in complexe dunwandige anatomie

Profiteer van een alles-in-één oplossing die geavanceerde technologie combineert met nieuwe flexibiliteit.

Injecteren, snijden, coaguleren – instrumentwissel is niet nodig – voor een efficiënte workflow en gebruiksgemak.

STEL UW EIGEN TECHNIEK SAMEN.



HYBRIDknife® flex

Vooruitgang in
3rd space endoscopie

erbe
power your performance.

Erbe Nederland B.V. · Velsenstraat 10 · 4251LJ Werkendam · Nederland · +31 183 509 755 · klantenservice@erbe-nederland.com

JOIN US ON     



Vooruitgang in 3rd space endoscopie

Dunne elektrode voor nauwkeurige toepassingen met beperkte thermische schade

Coaxiale tip voor injectie onder hoge druk

Flexibele sonde voor soepele doorvoer, zelfs bij retroflexie

Kleine diameter voor voldoende afzuiging door het werkkanaal

Vergrendelingsmechanisme voor constante elektrodenlengte



Naaldloos injecteren

Vergroot de submucosale ruimte zonder instrumentvervanging met behulp van hoge druk, naaldloze, weefselselectieve hydrodissectie.

Precies snijden en coaguleren

Bereik een hoge elektrochirurgische precisie met beperkte thermische schade met behulp van de dunne elektrode en pas verschillende coagulatie technieken toe met VIO® modi.

Flexibel met stabiliteit

Vertrouw op een soepele doorgang en stabiele elektrodenlengte, zelfs in moeilijke endoscopische posities met een hoek of retroflexie.

Marketing claim list 0188716, V005

erbe

VIO® 3


APC3

ERBEJET® 2



HYBRIDKNIFE® FLEX COMBINEERT ELEKTROCHIRURGIE MET HYDRODISSECTIE

Powered by VIO® 3

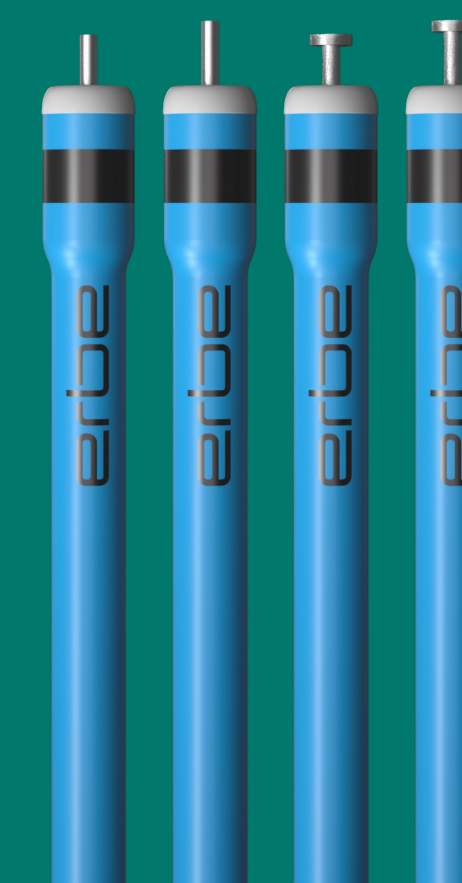

Lengte sonde	2300 mm
Buitendiameter (distale uiteinde)	2.6 mm
Buitendiameter (sonde)	2.1 mm
Lengte elektrode	1.5 mm / 2.0 mm
Type	I en T
Retroflexibiliteit	Meer dan 210°
T-type 1.5 mm	Nr. 20150-110
T-type 2.0 mm	Nr. 20150-111
I-type 1.5 mm	Nr. 20150-112
I-type 2.0 mm	Nr. 20150-113

ZOEK UW PRODUCT