

Precyzyjne zastosowanie w skompliko- wanej anatomii cienkościennej

*Skorzystaj z kompleksowego
rozwiązania łączącego najnowocze-
śniejszą technologię z nową
elastycznością.*

*Wstrzykuj, tnij, koaguluj - bez
potrzeby wymiany instrumentów -
dla efektywnej pracy i łatwości
użytkowania.*

UŻYWAJ WŁASNEJ TECHNIKI



erbe
power your performance.

HYBRIDknife® flex
Zaawansowana endoskopia
w trzech wymiarach

Erbe Polska Sp. z o. o. · al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8 · 02-972 Warszawa · Polska · +48 22 642-25-26 · sales@erbe.pl

JOIN US ON     



Zaawansowana endoskopia w trzech wymiarach

Cienka elektroda do precyzyjnych zastosowań z ograniczonymi uszkodzeniami termicznymi

Elastyczna sonda zapewniająca płynne przejście nawet w retrofleksji

Mała średnica zapewniająca odpowiednie zasysanie przez kanał roboczy

Współosiowa dysza do wstrzykiwania pod wysokim ciśnieniem

Mechanizm blokujący zapewnia stałą długość elektrody

erbe
HYBRIDknife flex

Wstrzykiwanie bez igły

Uniesienie przestrzeni podśluzówkowej bez wymiany instrumentów za pomocą wysokociśnieniowej, bezigłowej, selektywnej hydrodysekcji tkanek.

Precyzyjne cięcie i koagulacja

Osiągnij wysoką precyzję zabiegu elektrochirurgicznego z ograniczonym uszkodzeniem termicznym, dzięki cienkiej elektrodzie, zastosowaniu różnych technik i trybów koagulacji diatermii VIO®.

Elastyczność i stabilność

Oczekuj płynnego przejścia i stabilnej długości elektrody, nawet w trudnych pozycjach endoskopowych pod kątem lub w zgięciu wstecznym.


VIO® 3

APC 3

ERBEJET® 2

**NÓŻ HYBRIDKNIFE® FLEX
ŁĄCZY ELEKTROCHIRURGIĘ
Z HYDRODYSEKCJĄ**

Zasilany przez VIO® 3

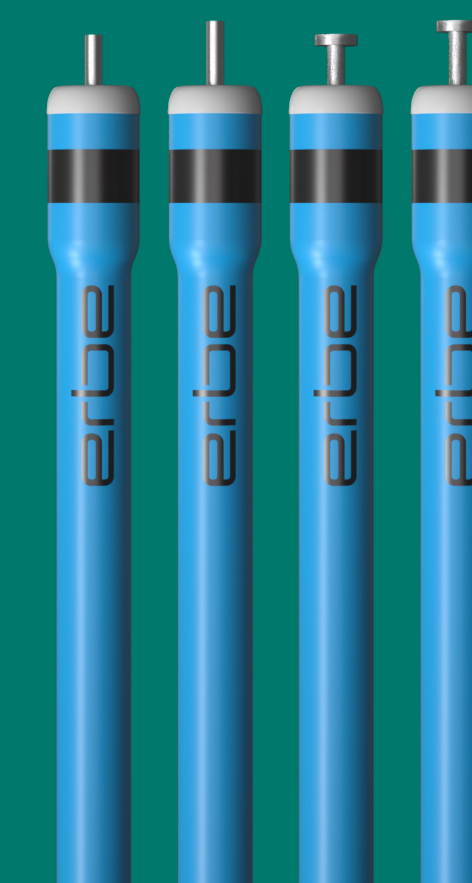

Długość prowadnicy	2300 mm
Średnica zewnętrzna (koniec dystalny)	2,6 mm
Średnica zewnętrzna (prowadnicy)	2,1 mm
Długość elektrody	1,5 mm / 2,0 mm
Typ	I i T
Elastyczność	Ponad 210°
T-Type 1,5 mm	Nr 20150-110
T-Type 2,0 mm	Nr 20150-111
I-Type 1,5 mm	Nr 20150-112
I-Type 2,0 mm	Nr 20150-113



ZNAJDŹ SWÓJ PRODUKT